

車椅子のままで段差のあるところを移動できます

車椅子用 電動昇降機 UD-320 C・S UD-320 C・L

「やさしさ」
かなえる
新発想

お一人でも分解・組立がさらに短時間で簡単にできるコストパフォーマンスに優れた昇降機です。平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。

車椅子用 電動昇降機

UD-320

UD-320 C・S 直進乗り込み
¥490,000 (¥539,000)



スロープ

最下端では自動でスロープが降ります。また、上昇に合わせて自動で立ち上がり、車止めの役目をします。昇降中は四方が囲まれますから安心です。

UD-320 C・L L字乗り込み
¥550,000 (¥605,000)

敷地幅が1,300mm以上あれば設置できるL字乗り込みタイプの昇降機です。

テーブルガイド

車椅子後車輪の位置を規制し、昇降中の安全を確保します。



ブリッジ

ブリッジが降りた状態ではスイッチを押しても動きません。

非常降下スイッチ

万が一の停電や故障時のための非常降下スイッチです。

リモコンスイッチ


手元で簡単に操作できる防水タイプのリモコンスイッチです。

直進ユニットテーブル

しっかりとした安定感のあるテーブルです。

ロールカーテン

テーブル下面への異物の侵入やほさみ込みを防止します。

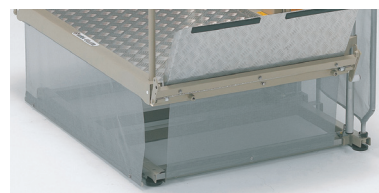

レバー

広い範囲から操作できる形状です。ブリッジを静かに降ろす新機能付です。

L字ユニットテーブル

左右どちらの仕様にも組みかえできます。

キースイッチ

いたずら防止用のキースイッチです。

ブリッジ

スロープ

人材確保等支援
助成金対象機種

介護保険特定福祉用具
貸与
適応商品

車椅子用電動昇降機

UD-320


セット価格設定

マスト部分とベースフレーム・テーブルフレーム等は共用です。共用部分と組み合わせる直進ユニット、L字ユニットそれぞれのセット価格を設定しています。ご注文の際には直進セットかL字セットをご指定ください。

●車椅子用 電動昇降機 (直進乗り込みタイプ)

UD-320c・S ¥490,000 (¥539,000)

寸法図

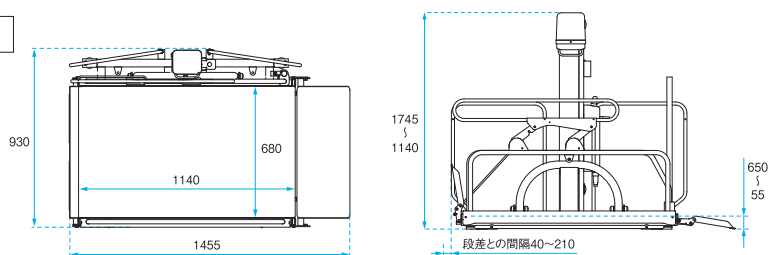

オプション



※写真はイメージです。


- ①Cシートカバー ¥13,000 (¥14,300)
- ②Sシートカバー ¥13,000 (¥14,300)
- 延長コード(10m) ¥8,800 (¥9,680)
- 敷板(合成ゴム200×200m.1個) ¥3,200 (¥3,520)
- 呼び出しスイッチ ¥25,000 (¥27,500)

※電源コード4m付 主要材質 スチール、ステンレス、アルミ合金
 ※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。
 ※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

全長(スロープを下げた状態)	1,455mm
全幅	930mm
全高	1,140~1,745mm
ブリッジ寸法	幅685mm×長さ275mm
スロープ寸法	幅685mm×長さ275mm
昇降範囲	55~650mm
昇降時間	50Hz=52秒 / 60Hz=43秒
スロープ角度	10°
テーブル内寸	680×1,140mm
重量(オプション除く)	75kg
耐荷重	150kg
電源	AC100V 50 / 60Hz
消費電力	100w
介護者同乗	不可

(JANコード) 4543085050141 (TAISコード)00084-000093


UD-320c・Sの設置手順

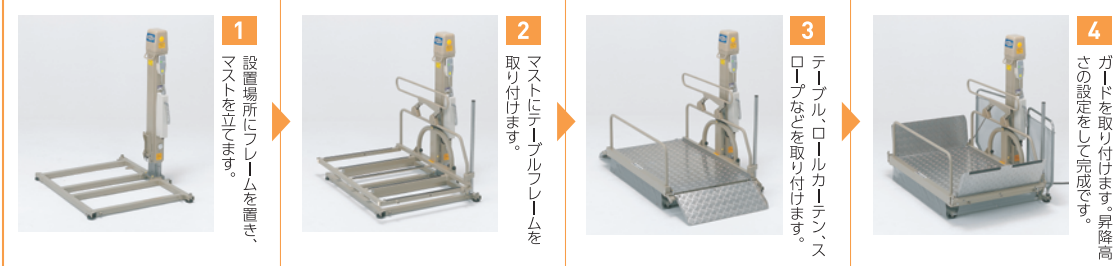

●車椅子用 電動昇降機 (L字乗り込みタイプ)

UD-320c・L ¥550,000 (¥605,000)

寸法図

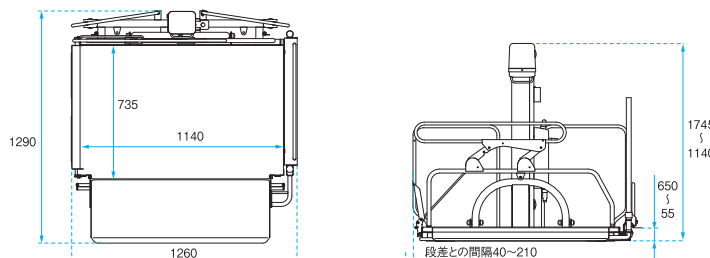

オプション



※写真はイメージです。

- ①Cシートカバー ¥13,000 (¥14,300)
- ②Lシートカバー ¥15,000 (¥16,500)
- 延長コード(10m) ¥8,800 (¥9,680)
- 敷板(合成ゴム200×200m.1個) ¥3,200 (¥3,520)
- 呼び出しスイッチ ¥25,000 (¥27,500)

※電源コード4m付 主要材質 スチール、ステンレス、アルミ合金
 ※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。
 ※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

全長(ブリッジを立てた状態)	1,260mm
全幅(スロープを下げた状態)	1,290mm
全高	1,140~1,745mm
ブリッジ寸法	幅685mm×長さ275mm
スロープ寸法	幅990mm×長さ350mm
昇降範囲	55~650mm
昇降時間	50Hz=52秒 / 60Hz=43秒
スロープ角度	6°
テーブル内寸	735×1,140mm
重量(オプション除く)	79kg
耐荷重	150kg
電源	AC100V 50 / 60Hz
消費電力	100w
介護者同乗	不可

(JANコード) 4543085050158 (TAISコード)00084-000094

UD-320c・Lの設置手順



株式会社 **いうら**
 本社・松山営業所 / 〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6
 TEL089 (964) 7770 FAX089 (964) 1522
 東京支店 / TEL03 (5939) 8611 FAX03 (5939) 8612
 札幌営業所 / TEL011 (788) 5334 FAX011 (788) 5341
 仙台営業所 / TEL022 (781) 6715 FAX022 (781) 6796
 北関東営業所 / TEL027 (212) 2066 FAX027 (212) 2067
 名古屋営業所 / TEL0568 (42) 6015 FAX0568 (71) 9656
 大阪営業所 / TEL06 (486 0) 6601 FAX06 (4860) 6602
 福岡営業所 / TEL0942 (45) 3808 FAX0942 (45) 3809

ホームページもご覧ください! **動画配信**
 メールアドレス info@iura.co.jp

お取り扱い

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。
 ※価格、仕様は予告なく変更する場合があります。※詳細は各営業所にお問い合わせください。
 (2023年12月)